



 **Obejrzyj film instruktażowy**
www.zdrovit.pl

Fibrocontrol

Fibrocontrol to wyrób medyczny przeznaczony do usuwania włókniaków.

 **Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją**

WŁÓKNIAKI

Włókniaki są bardzo powszechnymi i nieszkodliwymi małymi, miękkimi naroślami na skórze o średnicy 1-5 mm i wysokości 2-10 mm. Zwykle występują na szyi, pod pachami, w fałdach pachwinowych, na powiekach i pod piersiami. Włókniaki mogą być drażniące, ciężkie i wstydlive kosmetycznie.

Fibrocontrol

Fibrocontrol to wyrób do samodzielnego użycia w celu łatwego, bezpiecznego i bezbolesnego usuwania włókniaków. Po aplikacji wyrób **Fibrocontrol** zatrzymuje dopływ krwi do włókniaka poprzez podwiązanie. Następnie włókniak stopniowo wysycha w bezpieczny sposób, przy znikomym ryzyku powstania blizn i bez bólu. Włókniak musi mieć maks. 3 mm średnicy u podstawy i maks. 5 mm wysokości. To opakowanie **Fibrocontrol** zawiera aplikator i 3 plastry do usuwania włókniaków, każdy do usuwania jednego włókniaka.



UWAGA

Z produktem należy obchodzić się ostrożnie i zgodnie z instrukcją użycia.

Nie należy stosować wyrobu **Fibrocontrol** do usuwania włókniaków na powiekach lub w pobliżu oka, a także jeżeli włókniak nie ma koloru cielistego, nie mieści się w średnicy aplikatora (włókniak musi mieć maks. 3 mm średnicy u podstawy i maksymalnie 5 mm wysokości) lub krwawi.

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem jeśli masz raka skóry w wywiadzie, cierpisz na hemofilię lub jeśli włókniak wykazuje oznaki choroby skóry lub infekcji.

Należy pamiętać, że plaster do usuwania włókniaków może się przemieszczać jeżeli jest umieszczony w pachwinach lub fałdach skórnych. Należy mieć na uwadze, że uschnięty włókniak obumiera po kilku dniach. Jest to normalne, ponieważ wyrób zatrzymuje dopływ krwi do włókniaka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dana narośl jest w rzeczywistości włókniakiem, przed rozpoczęciem samodzielnego leczenia należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować wyrobu **Fibrocontrol** w przypadku uczulenia na jeden lub więcej jego składników / materiałów. Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie używać w wieku poniżej 18 lat. Nie używać jeśli urządzenie jest uszkodzone. **Fibrocontrol** jest bezpieczny do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

JAK STOSOWAĆ Fibrocontrol

Wyrób **Fibrocontrol** składa się z niniejszej instrukcji użycia, jak również:


- 1 aplikatora
- 3 krążków na nośniku blistrowym na podstawie

Ostrożnie oczyścić obszar wokół włókniaka za pomocą mydki i ciepłej wody. Można użyć łagodnego mydła, należy jednak unikać mydeł i środków czyszczących z olejkami, a także nasączonych chusteczek, ponieważ pozostałości mogą zapobiec przywieraniu plastra do skóry. Ostrożnie osuszyć obszar wokół włókniaka.

Wyjąć aplikator z opakowania, jak pokazano na rysunku 3. Przytrzymać aplikator, jak pokazano na rysunku 4.

Dopasować 2 wgłębienia fioletowej części podstawy aplikatora do 2 strzałek nadrukowanych na plastrze (powiększony widok na rysunek 4).

Docisnąć białą górę tak, aby aplikator przecisnął się przez środek plastra (patrz rysunek 5) aż do oporu.

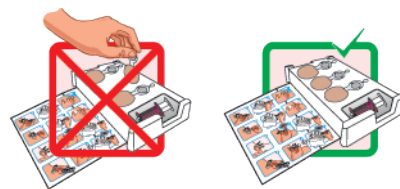

Odciągnąć aplikator, aby wyjąć plaster z nośnika blistrowego (rysunek 6).

Umieścić plaster na podstawie włókniaka (rysunek 7) jedną nogą aplikatora po każdej stronie włókniaka. Nie dotykać białej górnej części aplikatora.

Następnie nałożyć urządzenie na skórę, naciskając fioletową część aplikatora (przytrzymać urządzenie palcem wskazującym i kciukiem wokół fioletowej części aplikatora (rysunek 8)). Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund. Plaster zostanie automatycznie zablokowany w miejscu na włókniaku. Odsunąć aplikator (rysunek 9).

Usunąć papierową wkładkę, pociągając za klappkę (rysunek 10).

Zagiąć ostonkę na włókniaku i docisnąć palcem powierzchnię ostonki plastra, aby upewnić się, że klej dobrze przylega do skóry (rysunek 11) i pozostawić na miejscu na 6 dni (rysunek 12).

Nie drapać, nie pocierać ani nie zrywać plastra. Można brać prysznic, ale nie należy namaczać obszaru i nie pływać.

Unikać mydła, szamponu, produktów do włosów, balsamów do ciała, kremów i tłustych substancji w tym obszarze, ponieważ może to spowodować przedwczesne odklejenie się plastra.

Więcej instrukcji można znaleźć w wideo online pod adresem www.zdrovit.pl

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ PO ZDJĘCIU wyrobu Fibrocontrol

Wyrób **Fibrocontrol** zdejmuje się po 6 dniach. Podczas zdejmowania wyrobu zwykle usuwa się również uschnięty włókniak. W niektórych przypadkach włókniak jest nadal przymocowany do ciała i zrobił się czarny. Nie należy próbować odrywać włókniaka, ponieważ po kilku dniach sam odpadnie. Aby go ukryć, na włókniak można przykleić plaster samoprzylepny.

Jeżeli wyrób **Fibrocontrol** odpadnie w zalecany okresie użytkowania, nie należy go wymieniać, tylko nałożyć plaster samoprzylepny na włókniak i odczekać 10 dni, aby sprawdzić, czy zabieg się powiodł. W większości przypadków dopływ krwi do włókniaka zostaje zatrzymany po 1 dniu pozostawiania plastra na miejscu, a włókniak sam odpada. Jeśli zabieg nie powiódł się po 10 dniach oczekiwania, należy zaaplikować nowy wyrób **Fibrocontrol** na włókniak i usunąć po 6 dniach.

SKUTKI UBOCZNE

Fibrocontrol nie ma znanych skutków ubocznych. Włókniak zostaje usunięty bez bólu i blizn. Delikatne uczucie odczuwane podczas zabiegu może być odczuwalne po kilku dniach. Należy pozostawić wyrób na miejscu. Po usunięciu wyrobu może wystąpić nieznaczne krwawienie. Na skórze może pojawić się niewielki ślad, który jednak po pewnym czasie zniknie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w temperaturze 2-30°C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i w oryginalnym opakowaniu. Nie używać **Fibrocontrol** po upływie terminu ważności. Produkt **Fibrocontrol** można utylizować razem z odpadami domowymi.



Unigroup ApS, Diplomvej
373, DK-2800 Lyngby
Denmark

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa
Polska

Fibrocontrol jest zarejestrowanym znakiem towarowym.


Wyrób jest chroniony patentem.

Rejestracja: **Fibrocontrol** jest sklasyfikowany i zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.



SKŁAD

Nośnik: poliester i kauczuk syntetyczny / **Dysk:** polioksymetylen (POM) / **Ostonka:** poliester i akrylat

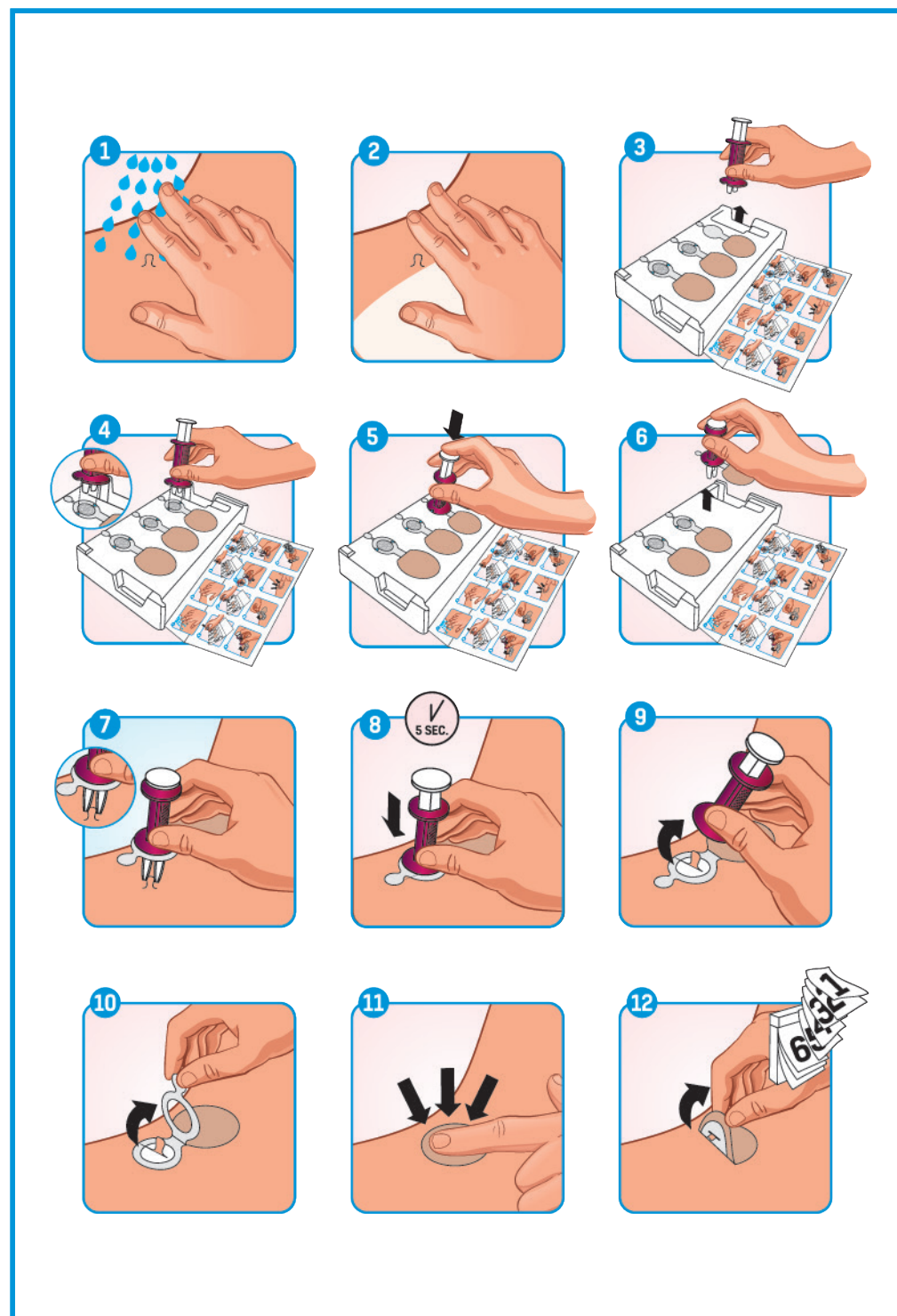

UG26082021-101230-PL